

HYDROPULSEUR DENTAIRE



220/ 240V 50Hz 18W

NOTICE D'UTILISATION

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.
- Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.



Veillez lire la notice avant d'utiliser le produit et la conserver pour référence ultérieure

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Avant de raccorder l'appareil au réseau électrique, veuillez vérifier que le voltage de votre appareil indiqué sur la plaque signalétique correspond à celui de votre installation électrique.
2. Cet appareil est uniquement destiné à un usage intérieur et domestique.
3. N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné comme décrit dans cette notice.
4. N'utilisez l'appareil que sur une surface stable.
5. L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand celui-ci est branché.
6. L'appareil doit être installé de façon à ce qu'il ne risque pas de tomber dans l'eau ou par terre. La prise électrique doit être accessible à tout moment.
7. Ne débranchez ni ne manipulez jamais la fiche avec les mains mouillées.
8. Ne déplacez ni ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne le placez pas et ne le stockez jamais dans des endroits où il risque de tomber dans une baignoire ou une douche.
9. Ne l'utilisez pas pendant le bain. Ne l'utilisez jamais en dormant ou en somnolant.
10. Ne pas immerger dans l'eau ou dans d'autres liquides.
11. Ne pas ramasser un appareil qui est tombé dans un liquide sans l'avoir préalablement débranché.
12. Pour éviter tout risque de blessure, ne dirigez pas le jet sous la langue, dans l'oreille, le nez, les yeux ou d'autres zones sensibles.
13. Vérifiez si le cordon est endommagé avant la première utilisation et avant chaque utilisation.
14. N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux livrés avec le produit.
15. Pour éviter tout risque de blessure, ne remplissez pas le réservoir avec de l'eau chaude ou bouillante. Ne mettez aucun objet dans le réservoir.
16. Remplissez seulement le réservoir d'eau ou de solutions bucco-dentaires.
17. Ne laissez pas pendre le cordon ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
18. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits ou des pièces où des sprays d'aérosols et d'oxygène ont été utilisés.
19. L'appareil doit être débranché :
 - s'il y a anomalie pendant le fonctionnement,
 - si le cordon ou la prise sont endommagés,
 - avant chaque nettoyage ou entretien,
 - avant de le monter ou de le démonter,
 - s'il n'est pas utilisé,
 - après utilisation.
20. N'essayez jamais de modifier ou de réparer vous-même l'appareil. Veuillez vous adresser à un service après-vente agréé.

Mises en gardes sanitaires

- Ne pas utiliser si vous portez un piercing. Retirez avant utilisation.
- Ne pas utiliser si vous avez une blessure ouverte sur votre langue, votre (vos) lèvre(s) ou dans votre bouche.
- Consultez votre dentiste avant d'utiliser cet appareil dans les cas suivants :
 - Si vous suivez un traitement ou des soins bucco-dentaires,
 - Si vous avez reçu des soins dentaires, bucco-dentaires ou gingivaux importants au cours des 2 derniers mois,
 - Si vous avez des problèmes dentaires, ou si vous suspectez avoir des problèmes de soins dentaires (plombages, couronnes, etc).

- Si vos gencives saignent de manière excessive après utilisation de cet appareil ou si le saignement persiste.
- Si vous avez des problèmes de santé,
- Si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif implanté.






DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Embouts
2. Réservoir
3. Commutateur marche/ arrêt
4. Molette de réglage de la pression d'eau
5. Couvercle/ Compartiment de rangement embouts
6. Embout à rotation à 360°C
7. Bouton d'éjection de l'embout
8. Bouton pause

Capacité du réservoir : 600 ml


Accessoires

				
Embout ordinaire de haute pression (x3) *	Embout parodontal (x1)	Embout orthodontique (x1)	Embout de plaque dentaire (x1)	Embout de nettoyeur de langue (x1)

* Embouts ordinaires de haute pression: 3 couleurs d'anneaux à usage familial permettant l'identification de l'utilisateur pour des raisons d'hygiène.

UTILISATION

Étape 1	Étape 2
<p align="center">Remplissage du réservoir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez le couvercle et le réservoir de la base. 2. Remplissez le réservoir avec de l'eau tiède. Ensuite essuyez soigneusement le réservoir. 3. Remettez le réservoir sur la base, avec la graduation face à vous, et appuyez fermement dessus jusqu'à entendre un clic. Ensuite posez le couvercle sur le réservoir. 	<p align="center">Insertion et retrait des embouts</p> <p>Insérez l'embout dans l'orifice situé au centre, sur le dessus du manche du jet dentaire. Un clic se fait entendre, indiquant qu'il a été correctement mis en place.</p> <p>Note : Pour retirer l'embout du manche du jet dentaire, appuyez sur le bouton d'éjection et retirez l'embout.</p>

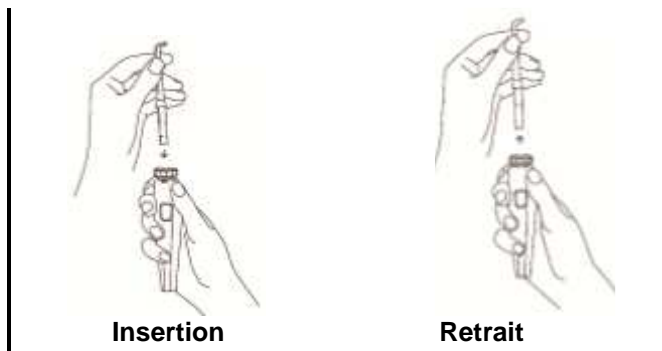

Étape 4

Mise sous tension

1. Branchez le cordon à une prise électrique. Si la prise est contrôlée par un interrupteur mural, assurez-vous qu'il soit allumé.
2. Penchez-vous au-dessus du lavabo et placez l'embout entre vos dents et votre gencive.
3. Modifiez l'orientation du jet en tournant le bouton en haut du manche (voir illustration ci-dessous).
4. Vérifiez que la molette de réglage de pression est bien placée avant la position 2. Avec votre main libre, appuyez sur le commutateur marche/arrêt (position I).



Étape 5

Réglage des paramètres de pression

1. Tournez la molette de réglage de la pression d'eau jusqu'à la position 2 lors de la première utilisation.
2. Augmentez graduellement la pression jusqu'à atteindre l'unité de pression qui vous convient.

Note : Les modes de pression du jet sont indiqués ci-dessous :

Mode doux : positions 1-2-3

Mode intermédiaire : positions 4-5-6-7


Mode fort : positions 8-9-10



Étape 6

Technique de nettoyage recommandée

1. Dirigez le jet à un angle de 90 degrés sur votre gencive, fermez un peu les lèvres pour permettre à l'eau de s'écouler dans le lavabo et pour éviter des éclaboussures. Pour de meilleurs résultats, commencez par la zone des molaires (dents du fond) pour aller progressivement vers les dents du devant.
2. Continuer de procéder ainsi jusqu'à ce que toutes les zones autour et entre les dents soient nettoyées.
3. Vous pouvez arrêter temporairement le flux, à tout moment, en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton pause sur le manche pendant la durée de la pause. Relâcher le bouton pour continuer.
4. Une fois terminé, éteignez l'appareil en appuyant sur le commutateur marche/arrêt (position O). Débranchez l'appareil.
5. Videz complètement le réservoir afin d'éviter la prolifération de bactérie dans l'eau stagnante.

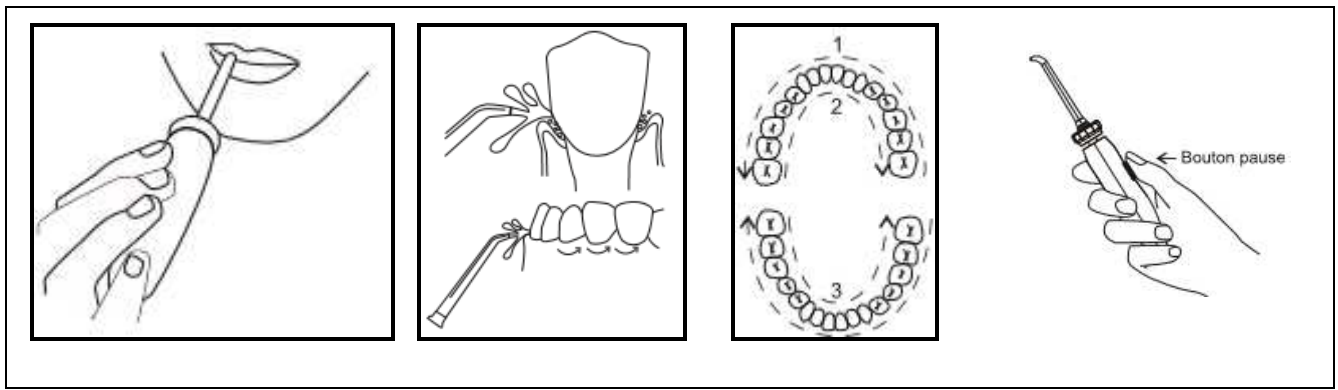


PROCÉDURES POUR UNE BONNE UTILISATION DES EMBOUTS

Avant d'utiliser les embouts, il conviendra de vous pencher au-dessus de votre lavabo et de procéder comme décrit ci-dessous selon l'embout utilisé.

Embout parodontal

L'embout parodontal propulse un jet d'eau ou la solution bucco-dentaire en profondeur dans les poches parodontales.

1. Placez l'embout doux contre une dent, sous la gencive, à un angle de 45 degrés.
2. Tournez la molette de pression vers la position 2.
3. Nettoyez doucement la gencive, en insérant l'embout entre les dents. Continuez à suivre le long de la gencive jusqu'à ce que vous finissiez le nettoyage.

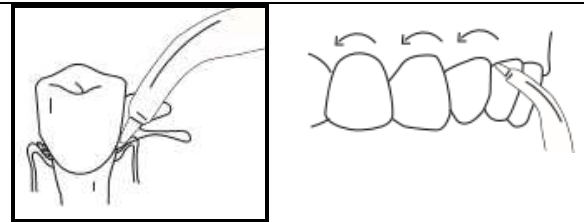

Nettoyeur de langue


1. Placez le nettoyeur de langue sur votre langue et allumez l'appareil.
2. Sélectionner l'unité de pression 2 et augmentez jusqu'à atteindre la pression qui vous convient.
3. Placez doucement le nettoyeur de langue au milieu de votre langue et exercer une légère pression vers l'avant.



Embout orthodontique

L'embout orthodontique est uniquement conçu pour broser et rincer simultanément les zones difficiles à atteindre.

Utilisez la brosse pour nettoyer autour de l'appareil ou prothèse dentaire. L'eau s'écoulera à travers la brosse pour déloger les résidus alimentaires.

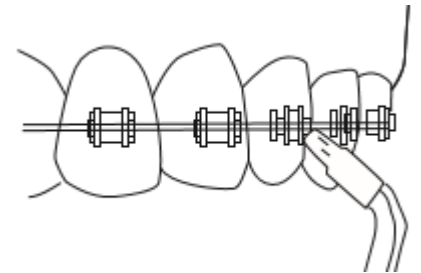

Embout de plaque dentaire

Dirigez le jet à un angle de 90 degrés vers votre gencive, fermez un peu les lèvres pour permettre à l'eau de s'écouler dans le lavabo et pour éviter des éclaboussures. Commencez par les molaires (dents arrières) en glissant doucement le long de la gencive et près des dents (les poils doivent toucher les dents), et en s'arrêtant brièvement entre les dents. Dirigez le jet progressivement vers les dents du devant.

Continuez jusqu'à ce que toutes les zones autour et entre les dents, à l'intérieur ou à l'extérieur, en haut et en bas soient nettoyées.



NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Avant de nettoyer l'appareil, positionnez le commutateur marche/ arrêt sur la position « O », placez la molette de réglage avant la position 2 et débranchez l'appareil de la prise électrique.
- Ne pas immerger l'appareil et le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans tout autre liquide.



RÉSERVOIR

- Après utilisation, videz le réservoir et rincez-le soigneusement si vous avez utilisé une solution bucco-dentaire.
- Mettez le réservoir à l'envers sur une surface plane et stable pour qu'il puisse sécher.
- Pour éviter tout risque d'ingestion, ne mettez pas d'alcool isopropylique ou d'autres liquides de nettoyage dans le réservoir.
- Afin de prolonger la durée de vie de l'hydropulseur dentaire et éviter qu'il ne s'encrasse, remplissez, de temps en temps, partiellement le réservoir avec de l'eau chaude du robinet. Dirigez l'embout du jet dentaire vers votre lavabo. Allumez l'appareil. Laissez-le tourner jusqu'à ce que le réservoir soit vide.

CORPS DE L'APPAREIL

- Ne pas utiliser des tampons métalliques à récurer ou des poudres à récurer.
- Nettoyez le corps de l'appareil si nécessaire en utilisant un tissu doux légèrement mouillé. Séchez-le soigneusement.

EMBOUS

- Avant de retirer l'embout, videz l'eau contenu dans celui-ci en dirigeant l'embout vers le lavabo;
 - Appuyer sur le bouton d'éjection de l'embout. Essuyer le manche et l'extérieur de l'embout. Laissez sécher.
-
- Conservez l'appareil à l'intérieur, dans un endroit sec et sûr.
 - Conservez l'appareil loin de la lumière solaire, l'humidité et la pluie.
 - Gardez l'appareil hors de portée des enfants.

PROBLEMES ET SOLUTIONS

Problèmes	Causes	Solutions
Embouts de jet dentaire et nettoyeur de langue: De l'eau coule au niveau de la connexion de l'embout et du manche du jet dentaire	Embout pas entièrement connecté	Retirez l'embout et réinstallez-le
Embout parodontal: pointe de l'embout abîmée	L'embout est usé	Remplacez par un nouvel embout
Pression inadéquate	Réservoir pas correctement positionné	Repositionnez le réservoir d'eau. Appuyez fermement sur le réservoir
L'unité ne démarre pas	Le moteur ne s'allume pas	Veillez vous assurer que la prise fonctionne.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

**Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Fabriqué en R.P.C
Commercialisé par EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3 D-40764, LANGENFELD,
ALLEMAGNE**

